

SciCan STATCLEAN™

Limpiador ultrasónico



Dese el lujo de un limpiador ultrasónico silencioso

El tanque de 1.6 galones del **StatClean** y su práctica tapa encaje automático puede alojar una serie de instrumentos en la cesta de secado manos-libres única, convirtiéndolo en el limpiador ultrasónico perfecto para completar sus requisitos de reprocesamiento.



Silencioso

La carcasa de pared de 4.5 mm de grosor del StatClean, fabricada en plástico de grado técnico, es más silenciosa que la mayoría de los diseños de carcasa de acero. Esto convierte al StatClean en una de las unidades ultrasónicas más silenciosas del mercado.



Fácil de usar

La pantalla LED de 3 colores del StatClean muestra con precisión el temporizador de rango completo de 1 – 30 minutos y la opción de desgasificación*. El StatClean está equipado con una memoria de desconexión avanzada que le permite guardar el ajuste del último temporizador.

La válvula del desagüe de fácil acceso elimina la necesidad de vaciar la solución del tanque, excluyendo la posibilidad de derrames.



Alimentación

Dos transductores ultrasónicos de grado industrial con circuitos de control independientes proporcionan una distribución uniforme de ondas ultrasónicas, aumentando la eficiencia de la limpieza en hasta un 40 % en comparación con otras unidades en el mercado.



Resistencia al agua


El StatClean ha sido diseñado para ser resistente a la incursión de agua dentro del panel de control con el fin de garantizar un rendimiento óptimo de forma continuada.

* Por favor, consulte las instrucciones de uso de la solución de limpieza de sus instrumentos para determinar si la desgasificación es necesaria.


Especificaciones del StatClean

Tamaño de unidad	20.3" x 12.0" x 9.4" (51.5 x 30.5 x 24.0 cm)
Suministro eléctrico	Modelo SC-P4862: 120 W (CA 100-120 V, 50/60 Hz) Modelo SC-P4862-CE: 140 W (CA 220~240 V 50/60 Hz)
Capacidad del tanque	1.6 galones (6.0 l)
Capacidad máxima	1.3 galones (5.0 l)
Capacidad mínima	0.9 galones (3.35 l)
Tamaño del tanque	12.8" x 8.1" x 3.9" (32.3 x 20.5 x 9.9 cm)
Longitud máxima de un artículo dentro del tanque	13.4" (34.0 cm)


Accesorios

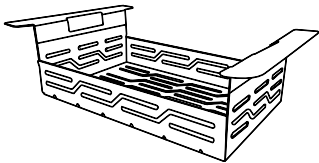


Cesta de acero inoxidable
SC-SOB4862A

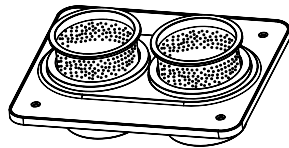

Set de soporte doble para
vasos de precipitado:
Vaso de precipitado de 500 mm
de vidrio + SS perforado
SC-BHK04A

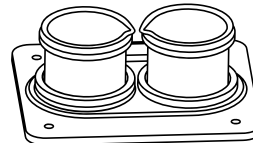

Set de soporte doble para
vasos de precipitado
SC-BHK02A

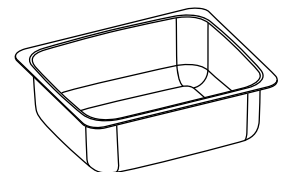

Cámara de limpieza extraíble
SC-IT4862A



BioSonic® UC32[†] (236 mL)

Limpiador enzimático para lavadoras ultrasónicas

UC32 combina la función detergente no-iónica del UC30 con enzimas que actúan para descomponer las partículas de suciedad rebeldes. Descompone y libera efectivamente los restos endurecidos sobre la superficie de los instrumentos, minimizando la necesidad de cepillado manual.

Fabricado para / Distribuido por:

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd.,
Toronto, ON, Canadá, M3B 3P9
Tel.: 416-445-1600
N.º de teléfono gratuito: 1-800-667-7733
customerservice@scican.com

†Fabricado por:

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls
Ohio 44223/US

www.scican.com

STATCLEAN es una marca comercial de SciCan Ltd. BioSonic es una marca registrada de Coltène/Whaledent Inc.

COLTENE