

Autoclave à chambre à vide

BRAVO^{MC}



Le mélange parfait de rapidité et de capacité

Le stérilisateur à chambre à vide fractionné **BRAVO**, de classe B, incorpore les cycles pré-vac (retrait de l'air) et post-vac (séchage) pour une efficacité optimale.



Rapidité

Les appareils BRAVO 17V et 21V figurent parmi les autoclaves à chambre à vide les plus rapides sur le marché, stérilisant et séchant les instruments en 24 à 28 minutes seulement.



Qualité

La caractéristique d'usage unique de l'eau garantit qu'une eau pure est utilisée pour chaque cycle. L'eau pure prévient l'accumulation d'huile et de résidus.



Polyvalence

L'appareil BRAVO offre différentes options de remplissage et de vidange : un orifice de remplissage manuel sur le dessus et un à l'avant de l'appareil, et un orifice pour le remplissage automatique à l'arrière qui permet de puiser l'eau d'une bouteille de 10 L placée à une distance de 6 pieds ou moins de l'appareil.



Séchage

Le mécanisme de verrouillage de la porte lors du séchage et du vide permet à l'appareil BRAVO de réaliser un séchage plus rapide que tout autre autoclave à chambre à vide.



Capacité

L'appareil BRAVO 17V peut stériliser 3 cassettes pleine grandeur ou jusqu'à 20 sachets.

L'appareil BRAVO 21V peut stériliser 3 cassettes d'instruments de chirurgie buccale ou jusqu'à 25 sachets.



Durée des cycles et poids maximal des charges

Cycles (134 °C @ 4 minutes)	Durée du cycle (séchage inclus**)		Poids maximal de la charge	
	17V	21V	17V	21V
Poreux (pièces à main)/Emballé	35 min.	40 min.	*	*
Creux (pièces à main)/Non emballé	27 min.	32 min.	6 kg / 13,6 lb	7,5 kg / 16,5 lb
Solide/Emballé	24 min.	28 min.	3 kg / 6,6 lb	4 kg / 8,8 lb
Solide/Non emballé	19 min.	23 min.	6 kg / 13,6 lb	7,5 kg / 16,5 lb

* 17(V) / 21V : Matériau poreux non emballé : 1 kg /1,25 kg, Matériau poreux dans un emballage unique : 0,75 kg /1 kg, Matériau solide/instruments creux dans un emballage unique : 3 kg /4 kg, Matériau solide/instruments creux dans un emballage double : 1,5 kg/2 kg.
 ** Note : Durée des cycles pour les modèles 220 V

Spécifications des appareils

	BRAVO 17V	BRAVO 21V
Dimensions de l'appareil (L x l x H) [†]	22 x 19 x 16,5 po / 560 x 480 x 420 mm	25 x 19 x 16,5 po / 635 x 480 x 420 mm
Volume	4,5 gal / 17 L	5,5 gal / 21 L
Dimensions de la chambre (P x L)	10 x 13,5 po / 254 x 343 mm	10 x 17,5 po / 254 x 445 mm
Poids	128 lb / 55 kg	139 lb / 63 kg
Tension	220 V, 10 A	220 V, 10 A

[†] Lors de l'installation dans une armoire, un espace minimal de dégagement de 4 po/2 po (102 mm/51 mm) est nécessaire autour de l'appareil (côtés, arrière, dessus) pour permettre à l'air de circuler.

Accessoires recommandés



Ensure^{MC} Contrôle de la stérilisation à la vapeur

Un système contrôle interne facile à utiliser pour contrôler la stérilisation à la vapeur.


SCI-BISK-120 - Trousse de départ Ensure IB (25 IB, incubateur et registre)



VistaPure^{MC} AutoFill

Réapprovisionnez automatiquement tout autoclave STAT/M[®] et BRAVO, modèle ancien ou nouveau, avec une eau de qualité distillée – voilà une vraie fonction mains-libres.

S3020 - AutoFill pour STAT/M
S3030 - AutoFill pour BRAVO

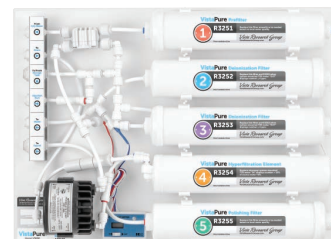

VistaPure

Filtration de l'eau
Fournit deux degrés d'eau de haute qualité pour les autoclaves, les bouteilles dentaires, les nettoyeurs à ultrasons et le cycle de rinçage des lave-instruments.

V3000



Indicateurs biologiques (IB) Ensure

Les indicateurs biologiques Ensure sont fiables et indépendants pour des résultats obtenus en 24 heures. Les IB sont la seule méthode pour assurer l'efficacité de la performance de votre stérilisateur. Les IB Ensure sont offerts dans une trousse de départ composée de 25 IB, de l'incubateur et d'un registre simple à remplir.

SCI-BI100 - Indicateurs biologiques (100/bte)

Fabriqué par :

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd., Toronto, ON, Canada, M3B 3P9

T +1 416-445-1600

SF +1 800-667-7733

customerservice@scican.com

www.scican.com

VistaPure^{MC}

est fabriqué par :

Crosstex International, Inc.

1733 W. Parkside Lane

Phoenix, AZ 85027 / USA

T +1 800-531-2221

VistaResearchGroup.com